

AquaProtect se coloca fácilmente, sin necesidad de tiras adhesivas o gomas.



En caso de superficie rugosa, ésta deberá cubrirse con una media o similar para evitar que se rasgue la funda.

Tapar las heridas abiertas.



AquaProtect es muy elástica: sólo se tiene que pasar por la pierna o el brazo y estirarla tanto como sea posible.

Hacer retroceder ligeramente el extremo para que el borde hermetizante quede plano en la zona del músculo.



En el caso de que el material apriete demasiado y/o se enrolle en el extremo, ensanchar la abertura tirando de ella

varias veces de modo que se ajuste a la medida deseada. La funda está lista para la ducha.

Para bañarse o nadar, primero debe sumergirse con cuidado y casi por completo la pierna o el brazo. A continuación, debe tirarse de una punta para dejar salir el aire y fijar de nuevo el borde hermetizante. La funda está lista para bañarse.

AquaProtect®

AquaProtect®

AquaProtect	Modelo	Longitud ±	Contorno extremidad
Antebrazo	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
Antebrazo	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
Brazo	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
Brazo	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
Pierna	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
Pierna	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
Muslo	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
Muslo	LP 33	84 cm	≥ 31 cm

Distribuido en España por:

Hilefarma, S.L. • Polígono Industrial Torremirona
C/Josep Trueta • Nave 9 • 17162 Montfulla – Girona
Tel. 972 402560 • Fax 972 402561
E-Mail: info@hilefarma.com • www.hilefarma.com

PRAMETA


Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33
info@praemeta.de • www.praemeta.de

03/07 • Reservado el derecho de cambios. Ninguna responsabilidad en caso de errores de imprenta o equivocaciones.



¡Protección total del vendaje en la ducha y en la playa!

AquaProtect®

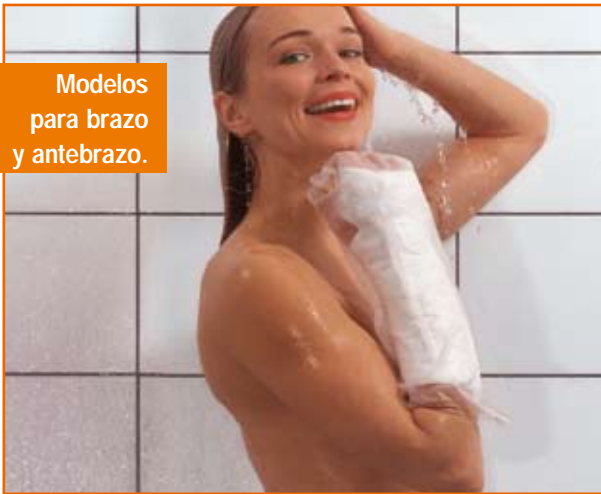

Modelos para brazo y antebrazo.

Con AquaProtect se acabaron los problemas del vendaje.

A partir de ahora podrá tomarse una ducha refrescante o un baño relajante sin preocuparse lo más mínimo. Tampoco deberá preocuparse a la hora de lavar los platos o fregar el suelo: cubriendo su vendaje con AquaProtect conseguirá una impermeabilidad total.



Modelos para pierna y muslo.

¡Protección total del vendaje en la ducha y en la playa!



La funda impermeable AquaProtect está fabricada con poliuretano agradable al tacto.

Existen ocho modelos disponibles en dos tallas para cada extremidad: antebrazo, brazo, pierna y muslo. Los modelos para pierna están provistos de suelas antideslizantes que proporcionan una mayor firmeza y seguridad.

El material no contiene látex

AquaProtect es muy resistente: Puede utilizarse muchas veces.

AquaProtect está disponible en farmacias o parafarmacias.

AquaProtect®



Tallas pequeñas en todos los modelos.

AquaProtect protege de forma eficaz los vendajes de brazos y piernas no sólo en la ducha y el baño, sino también en la piscina y al practicar deportes acuáticos.

AquaProtect mantiene la impermeabilidad tanto si nada como si bucea.



Indicada también para deportes acuáticos.