


**Zo eenvoudig trekt u Aqua Protect aan  
- geheel zonder plak / kleefmid-  
delen of rubberen afsluitingsringen**



Ruw gips glad maken.  
Gebruik bij een ruwe  
ondergrond een kous  
of iets dergelijks om be-  
schadiging te  
voorkomen.

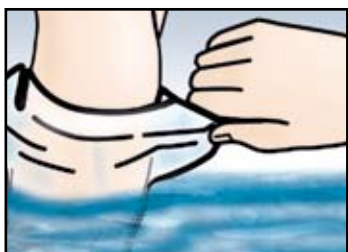

Open wonden bedekken.  
**AquaProtect** is bijzonder  
rekbaar-eenvoudig opstro-  
pen en zo ver mogelijk  
omhoog trekken. Trek de  
afdichting iets terug om  
deze tot op de hoogte van  
de spieren goed te laten  
aansluiten.



Mocht het materiaal te  
strak zitten en/of aan het  
uiteinde oprollen, dan  
moet de opening  
meermals krachtig opge-  
rekt worden om de span-

ning te verminderen. Klaar om te douchen.

Bij het baden en zwemmen eerst 90% van AquaProtect  
voorzichtig onderdompelen, aan de hoek trekken om lucht  
te laten ontsnappen en de afsluiting weer goed laten aans-  
luiten.

**Aqua  
Protect®**

artikel	model	lengde ±	omvang
onderarm, groot	AP 21	54 cm	≥ 22 cm
onderarm, klein	AP 17	43 cm	≥ 17 cm
geheel arm, groot	AP 31	80 cm	≥ 26 cm
geheel arm, klein	AP 26	66 cm	≥ 19 cm
onderbeen, groot	LP 25	64 cm	≥ 32 cm
onderbeen, klein	LP 20	51 cm	≥ 24 cm
geheel been, groot	LP 44	112 cm	≥ 47 cm
geheel been, klein	LP 33	84 cm	≥ 31 cm

Distributeur Nederland



Medzorg Nederland B.V. • Satellietbaan 14b  
NL-2181 MH Hillegom • Nederland  
Phone: 0252 536200 • Fax: 0252 429092  
www.medzorg.nl • info@medzorg.nl

**PRAMETA**

Genker Strasse 16 • D-53842 Troisdorf  
Tel. +49(0)2241.23996-0 • Fax +49(0)2241.23996-33  
info@praemeta.de • www.praemeta.de

03/07 • Technische wijzigingen voorbehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor drukfouten of vergissingen.



**Beschermt  
gips en verband  
in bad en op  
het strand**

**Aqua  
Protect®**

**Aqua  
Protect®**

Modellen voor onder- en geheel arm



AquaProtect maakt het leven met een verband gips heel eenvoudig.

Een verfrissende douche of zelfs een ontspannend bad – dat kan vanaf nu moeiteloos.

Ook de afwas of andere natte werkzaamheden zijn geen probleem meer: u trekt het AquaProtect aan over het verband / gips waardoor het absoluut waterdicht beschermd is.

Modellen voor onder- en geheel been



## Beschermt gips en verband in bad en op het strand!

AquaProtect is een absoluut waterdichte beschermhoes, gemaakt van huidvriendelijk polyurethaan. Er zijn 8 uitvoeringen met elk modellen voor onderarm, geheel arm, onderbeen en geheel been. De beenmodellen hebben slipvaste zolen, die voor houvast en zekerheid zorgen. Het materiaal bevat absoluut geen latex.

AquaProtect is zeer sterk en meervoudig bruikbaar.

AquaProtect is verkrijgbaar in o.a. gipskamers, apotheken en medische speciaalzaken.

# AquaProtect®

Alle modellen ook in kleine maten



AquaProtect beschermt arm- en been bandages niet alleen bij het douchen of baden, echter ook in het zwembad en bij watersport.

Ook bij zwemmen of duiken:

AquaProtect is absoluut waterdicht

Ook voor de watersport

